

## 『 レビス® IgE-ELISA キット(マウス) 』取扱説明書

この度は弊社製品をご購入いただきましてありがとうございます。ご使用に際してはキットに同梱された取扱説明書のみに従って測定を実施して下さい。なお、操作法は弊社 Web サイト[\[良い結果を出すためのポイント\(動画\)\]](#)、並びに[Q&A](キットの蓋を開けた際に一番上にあるカード(13×10cm)に記載されたパスワードをご利用下さい)をご参照下さい。

### 1.使用目的

本キットはマウス IgE を定量的に測定するためのサンドイッチ酵素免疫測定法です。

本キットは研究のみにご使用下さい。

特長

- 全反応時間は 5 時間 20 分です。
- マウス血清または血漿中の IgE を測定します。
- 微量な検体(標準操作法は 5  $\mu$ l)で測定可能です。
- 1 キットは 96 ウエルです。
- 標準品はマウス由来のものです。
- 全ての試薬は溶液タイプです。

### 2.キットの保存と使用期限

キットは 2～8℃で保存して下さい(凍結厳禁)。この保存条件下でキットは製造月から 6 カ月(外箱のラベルに記載)までは安定です。有効期限の過ぎた試薬は使用しないで下さい。開封した各試薬につきましては、保管状態により影響を受ける可能性がありますので早めのご使用を推奨します。

### 3.イントロダクション

IgE (Immunoglobulin E、免疫グロブリン E)は 5 番目に発見された免疫グロブリンで、ドメイン 5 個(VH、CH $\epsilon$  1～4)から構成されている H $\epsilon$  鎖 2 本と L 鎖 2 本からなる分子量約 190,000 の糖タンパク質で、電気泳動的には  $\gamma$  1 領域に移動します。代謝半減期は約 3 日で、正常人の血清中での濃度はきわめて低く 300ng/ml 程度ですが、寄生虫の感染や枯草熱で増加します。アレルギーに関与する IgE はレアギンと呼ばれていますが、アレルゲンで感作された際増加したレアギンは皮膚、呼吸器、消化器などに存在する好塩基性顆粒球や肥満細胞の Fc $\epsilon$  R1 受容体と Fc 部位で結合し、細胞を感作し、これにアレルゲンが結合すると細胞は脱顆粒を起こしてヒスタミン、セロトニン、プロテアーゼ、ヘパリン、化学走性因子、プロスタグランジン、ロイコトリエン等を放出させ、気管支収縮や粘膜浮腫、分泌高進などにより、気管支喘息、一部のじんま疹、アレルギー性鼻炎、アナフィラキシー等の I 型アレルギー反応を惹き起こします。

弊社では全般的なマウス IgE 及び特定のアレルゲン(OVA)に特異的なマウス IgE 測定キットを提供しております。

### 4.測定原理

本キットは標準品、希釈検体を抗 IgE モノクローナル抗体固相化マイクロプレートウエル中でインキュベートします。2 時間のインキュベーションと洗浄後、ビオチン結合抗 IgE モノクローナル抗体を加え捕捉された IgE とともに 2 時間インキュベートします。洗浄後、ペルオキシダーゼ・アビジン結合物を加え、1 時間インキュベートします。再度の洗浄後、ウエルに残ったペルオキシダーゼを発色液(TMB)と反応させます。反応は酸性の溶液の添加で停止され、反応の結果生じた黄色の産物が 450nm(副波長 620nm)で比色測定されます。吸光度は IgE 濃度にほぼ比例します。標準品濃度に対して吸光度をプロットし標準曲線を作製し、この標準曲線から未知検体中の濃度が決定されます。

### 5.注意事項

- 本キットは ELISA 法の研修を終了した方、または指導者の下でご使用下さい。  
用手法操作で測定する際にはピペティング操作の再現性が安定した方がご使用下さい。
- 準備並びに本キット操作中は手袋、眼鏡、保護用着衣を身につけて下さい。
- 試薬類を皮膚に付けないで下さい。本キットの試薬が誤って、目、口、傷口、皮膚等に付着した場合は直ちに水道水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要な場合は医師の手当てを受けて下さい。

- 本キットを使用している場所では飲食や喫煙をしないで下さい。
- 検体は感染の危険性があるものとして充分注意して取り扱って下さい。本キットは動物由来の成分を含んでいます。
- 使用済みの検体、使用した消耗品等は 1%ホルマリン、2%グルタルアルデヒドまたは 0.1%以上の次亜塩素酸ナトリウム溶液に 1 時間以上浸けて下さい。またはオートクレーブ滅菌処理して廃棄して下さい。使用した消耗品や未使用の薬品類は所属施設の規定並びに各地域の法令に従って廃棄して下さい。
- 試薬類は口でピペッティングしないで下さい。
- ロット番号の違う試薬とは混ぜて使わないで下さい。
- 各ステップでの静置反応時には、ウェルの乾燥、異物の混入、温度の偏り、分注試薬の蒸発を防止する為、必ずプレートシールを貼って下さい。
- ELISA 法は測定環境により影響を受けます。測定操作、静置反応場所の室温: 20~25℃(実験台上またはインキュベータ内温度)を厳守して下さい。また、風速(エアコン風も含む): 0.4m/sec(\*①) 以上、湿度 30%未満の環境下での測定は避けて下さい(9.技術上のヒントをご参照下さい)。  
(\*①)風速 0.4m/sec の目安は弊社 Web サイトの動画「[反応条件](#)」をご参照下さい。

## 6. 構成品

構 成 品	状 態	容 量
(A) 抗体固相化 96 ウェルプレート	洗浄後使用	96 wells(8×12)／1 枚
(B) 標準 IgE 溶液(マウス)(100 ng/ml)	希釈後使用	600 μl／1 本
(C) 緩衝液	そのまま使用	60ml／1 本
(D) ビオチン結合抗 IgE 抗体	希釈後使用	10 μl／1 本
(E) ペルオキシダーゼ・アビジン結合物	希釈後使用	20 μl／1 本
(F) 発色液(TMB)	そのまま使用	12ml／1 本
(H) 反応停止液(1M H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) ※取扱注意	そのまま使用	12ml／1 本
(I) 濃縮洗浄液(10×)	希釈後使用	100ml／1 本
プレートシール		4 枚
取扱説明書		1 部

## 7. 添付されていないが必要な器具 □チェックリスト

- 精製水(蒸留水)
- 標準溶液希釈用試験管
- 洗浄液希釈用ガラス器具(メスシリンダー・ビーカー・瓶)
- チップ交換型ピペット(使い捨てチップで 5 μl を正確にピペッティングできるもの、及び 10~100 μl、100~500 μl を正確にピペッティングできるもの)
- 連続分注ピペット(例 Eppendorf の multipette plus)、50 μl を連続分注できるもの
- ペーパータオル等の吸水性のあるもの(洗浄後にプレートに残った液を取り除く)
- 攪拌器(Vortex タイプ)
- マイクロプレート振とう器(約 600~1,200 rpm)
- 96 ウェルプレート用洗浄機(あれば好ましい)または噴射ビン(弊社 Web サイトの動画「[洗浄操作](#)」をご参照下さい。)
- 96 ウェルプレートリーダー(450 ±10 nm、620nm:600~650nm)
- データ計算用ソフトウェア

## 8. 試薬の調製

- \* キットの試薬は使用前に必ず室温(20~25℃)に戻して下さい(2 時間位が目安です)。
- \* 6.で「そのまま使用」とある試薬は室温化後そのままの状態で使用できます。「濃縮液」とあるものについては下記の要領で調製して下さい。
- \* 測定に必要な分だけ試薬を調製して下さい(ご不明な際にはお問い合わせ下さい)。

### 【濃縮された試薬類】

[(B) 標準 IgE 溶液(マウス)(100 ng/ml)]; 標準曲線作製用

(B) 標準 IgE 溶液(マウス)(100 ng/ml)(原液)と(C) 緩衝液を使って標準溶液を調製して下さい。

下記は一例です。

標準溶液の容量	緩衝液	濃度 (ng/ml)
原液	0 $\mu$ l	100
原液 150 $\mu$ l	50 $\mu$ l	75
原液 100 $\mu$ l	100 $\mu$ l	50
原液 50 $\mu$ l	150 $\mu$ l	25
原液 20 $\mu$ l	180 $\mu$ l	10
原液 5 $\mu$ l	495 $\mu$ l	1.0
0(ブランク)	200 $\mu$ l	0

#### [(D)ビオチン結合抗 IgE 抗体]

10  $\mu$ l を充分分取できる量をご提供しています。

濃縮液を (C) 緩衝液で **1,000 倍** に希釈して下さい。2 段階希釈をお薦めします。

#### [(E)ペルオキシダーゼ・アビジン結合物]

20  $\mu$ l を充分分取できる量をご提供しています。

濃縮液を (C) 緩衝液で **2,000 倍** に希釈して下さい。2 段階希釈をお薦めします。

#### [(I)濃縮洗浄液(10 $\times$ )]

濃縮洗浄液(10 $\times$ )を室温化された精製水(蒸留水)で **10 倍** に希釈して下さい。

例: 100ml の濃縮洗浄液(10 $\times$ ) + 900ml の精製水(蒸留水) (96 ウェル全てを使用する場合)

### 【試薬の安定性と保存方法】

#### (A)抗体固相化 96 ウェルプレート

未使用(冷蔵状態を保った状態でシールを剥がしていない)抗体固相化ストリップは同梱のジップシールパックに戻し、そのまま 2~8℃で保存して下さい。有効期限内安定性を保ちます。

#### (B)標準 IgE 溶液(マウス)(100 ng/ml)

キットを分割して使用する際は使用する直前に冷蔵庫より取り出し希釈調製し、残りの原液は室温に戻さないで直ちに蓋をしっかりと閉め、2~8℃で保存して下さい。有効期限内安定性を保ちます。希釈した各標準溶液は直ちに使用し、保存はしないで下さい。

#### (C)緩衝液及び(F)発色液(TMB)

一部の溶液を使用する際は必要量より少し多めの量を別の容器に移し、残りは室温に戻さないで直ちに蓋をしっかりと閉め、2~8℃で保存して下さい。有効期限内安定性を保ちます。

#### (D)ビオチン結合抗 IgE 抗体及び(E)ペルオキシダーゼ・アビジン結合物

キットを分割して使用する際は希釈時に冷蔵庫より取り出し希釈調製し、残りの原液は室温に戻さないで直ちに蓋をしっかりと閉め、2~8℃で保存して下さい。有効期限内安定性を保ちます。使用残りの希釈済み液は廃棄して下さい。

#### (H)反応停止液(1M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)

使用残りを保存する場合は、蓋をしっかりと閉め、2~8℃で保存して下さい。有効期限内安定性を保ちます。

#### (I)濃縮洗浄液(10 $\times$ )

濃縮洗浄液(10 $\times$ )を保存する場合は、蓋をしっかりと閉め、2~8℃で保存して下さい。有効期限内安定性を保ちます。使用残りの希釈済み洗浄液は廃棄して下さい。

### 9.技術上のヒント

- 検体と試薬に不純物が混ざらないように気をつけて下さい。1 ウェル／1 チップのご使用をお薦めします。
- 発色液は 96 ウェルプレートに使用するまではほぼ無色または薄い青色澄明です。光を避けて保存して下さい。
- 反応停止液は使用するまでは無色です。
- やむを得ず、測定操作を、風速:0.4m/sec 以上、湿度 30%未満の環境下で実施する場合には、各ステップの静置反応時、プレートシールをすることに加え、下記のような方法をご検討下さい。  
例) インキュベータ内、発泡スチロール製箱内で静置反応させる等。測定室の環境条件により対策方法が異なる場合がありますので、詳細を弊社 Web サイトの動画「[反応条件](#)」でご確認下さい。


## 10. 検体の調製

本キットはマウス血清または血漿中の IgE を測定します。

- 検体は定法にしたがって採取しすぐに測定するか、 $-35^{\circ}\text{C}$  以下で凍結保存して下さい。凍結した検体は測定する直前に解凍し十分に攪拌して下さい。繰り返しの凍結融解は避けて下さい。正しい結果が得られない原因になります。
- 採血の際にヒト用の採血管をご使用になるのは避けてください。血清分離促進剤等の添加剤が測定系に影響を与える可能性が考えられます。
- 溶血した検体や高脂質検体は異常値の発生原因となりますので避けて下さい。

※血液成分の影響(高脂質・溶血等)を抑制する為に原検体中の脂質(乳び)・溶血が次項写真より高い場合は異常値発生の原因となる場合がありますので測定に使用しないで下さい。

本キットの場合、溶血は  $80\text{mg/dL}$  以上で影響が現れます。

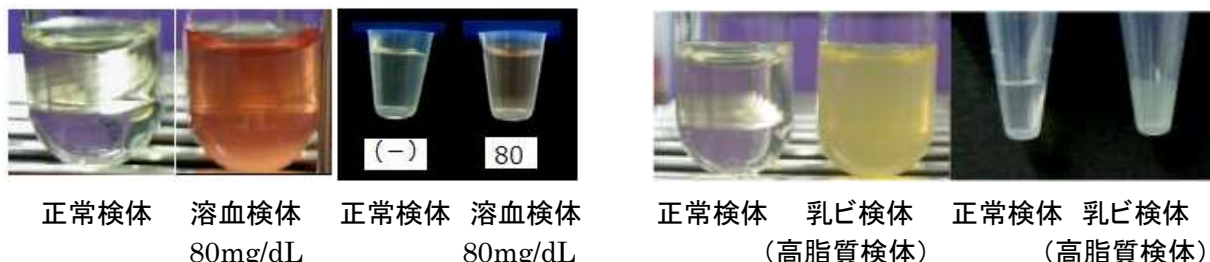

- 濁り及び不溶物のある検体は遠心分離等で除去後測定に用いて下さい。
- 妨害物質の影響が疑わしい検体は、同一検体において、異なる 2 ポイント以上の希釈率で希釈直線性を確認して下さい。
- 検体は測定範囲に入るよう、キット緩衝液を用いて検体を希釈して下さい。検体を希釈する場合はあらかじめ試験管(PP、PE、ガラス製)等を用いて緩衝液で希釈し測定ウエルに分注して下さい。

### 【検体の安定性と保存方法】

検体は採取後すぐに測定するか、1 週間以内に測定する場合は  $2\sim 8^{\circ}\text{C}$  で保存して下さい。また、長期に保管する場合は、 $-35^{\circ}\text{C}$  以下での凍結保管を推奨します。また、検体の希釈は用時調製として下さい。

## 11. 測定操作法

洗浄操作を始める前に次に分注する試薬を前もって用意して下さい。

抗体固相化プレートのシールは、プレートが十分に室温に戻ってから剥がして下さい。

- (1) あらかじめ調製した洗浄液を各ウエルに満たし、3 回洗浄(\*②)します。その後、ペーパータオルなどの上でプレートを逆さにし、軽く叩きつけるようにしてウエルに残った液を取り除きます。
- (2) 検体測定ウエルに予め適度に希釈した検体を  $50\mu\text{l}$  ずつ分注します。標準操作法では 10 倍希釈(緩衝液を  $45\mu\text{l}$ 、検体を  $5\mu\text{l}$ )。
- (3) 標準品測定ウエルに各 IgE 標準溶液を  $50\mu\text{l}$  ずつ分注します。
- (4) マイクロプレート振とう器などを用いて攪拌(\*③)します。
- (5) プレートシールを貼り、室温( $20\sim 25^{\circ}\text{C}$ )で 2 時間静置(\*④)します。
- (6) 反応終了後、反応液を捨て洗浄液を各ウエルに満たし、3 回洗浄(\*②)します。その後、ペーパータオルなどの上でプレートを逆さにし、軽く叩きつけるようにしてウエルに残った液を取り除きます。
- (7) 各ウエルにビオチン結合抗 IgE 抗体を  $50\mu\text{l}$  ずつ分注します。マイクロプレート振とう器などを用いて攪拌(\*③)します。
- (8) プレートシールを貼り、室温( $20\sim 25^{\circ}\text{C}$ )で 2 時間静置(\*④)します。
- (9) 反応終了後、反応液を捨て洗浄液を各ウエルに満たし 3 回洗浄(\*②)します。その後、ペーパータオルなどの上でプレートを逆さにし、軽く叩きつけるようにしてウエルに残った液を取り除きます。
- (10) 各ウエルにペルオキシダーゼ・アビジン結合物を  $50\mu\text{l}$  ずつ分注します。マイクロプレート振とう器などを用いて攪拌します。
- (11) プレートシールを貼り、室温( $20\sim 25^{\circ}\text{C}$ )で 1 時間静置(\*④)します。
- (12) 反応終了後、反応液を捨て洗浄液を各ウエルに満たし 3 回洗浄(\*②)します。その後、ペーパータオルなどの上でプレートを逆さにし、軽く叩きつけるようにしてウエルに残った液を取り除きます。
- (13) 各ウエルに発色液を  $50\mu\text{l}$  ずつ分注します。マイクロプレート振とう器などを用いて攪拌(\*③)します。
- (14) プレートシールを貼り、室温( $20\sim 25^{\circ}\text{C}$ )で 20 分間静置(\*④)します。




- (15)各ウェルに反応停止液を 50  $\mu$ l ずつ分注し、発色反応を停止します。
- (16)攪拌(\*③)後マイクロプレート用分光光度計で 450nm(副波長 620nm)での吸光度を測定します。副波長は 600~650nm の範囲で使用できます。
- (\*②)、(\*③)、(\*④)測定手順概要(7 ページ)をご参照下さい。

ワークシート(例)

	Strip 1&2	Strip 3&4	Strip 5&6	Strip 7&8	Strip 9&10	Strip 11&12
A	100 ng/ml	検体 2	検体 10	検体 18	検体 26	検体 34
B	75 ng/ml	検体 3	検体 11	検体 19	検体 27	検体 35
C	50 ng/ml	検体 4	検体 12	検体 20	検体 28	検体 36
D	25 ng/ml	検体 5	検体 13	検体 21	検体 29	検体 37
E	10 ng/ml	検体 6	検体 14	検体 22	検体 30	検体 38
F	1.0 ng/ml	検体 7	検体 15	検体 23	検体 31	検体 39
G	0	検体 8	検体 16	検体 24	検体 32	検体 40
H	検体 1	検体 9	検体 17	検体 25	検体 33	検体 41

## 12. 計算

- (1)測定毎に標準曲線を作製します。X 軸を標準溶液濃度 (ng/ml)、Y 軸を吸光度の標準曲線グラフを作製して下さい。標準曲線は弊社 Web サイト「技術情報」「ELISA の標準曲線」をご参照下さい。
- (2)標準曲線より、希釈検体の吸光度に対応する濃度(ng/ml)を読み取ります。読み取った濃度に検体希釈率(本測定法では 10 倍)を乗じ測定値とします。
- \* 検体の吸光度が標準曲線吸光度より外れた場合は(C)緩衝液にて適当倍率に調製し再度測定を実施して下さい。
  - \* 一番高濃度の標準溶液の吸光度付近の検体は緩衝液にて適当倍率に調製し再度測定することをお勧め致します。
- (3)反応温度が高い場合、吸光度が全体的に高くなります。測定機器によりますが吸光度の信頼性のない領域の標準曲線は使用しないで下さい。また、反応温度を 20~25℃範囲内にして再測定を実施して下さい。
- \* コンピュータソフトでの演算処理では、3 次多項式または 4 パラメーターの使用をお勧め致します。
  - \* マウスの臨床所見は臨床症状や他の検査結果などを総合的に判断して行う必要があります。
- 右のグラフは標準曲線例です(吸光度は、測定環境により変動します)。
- \* プレートリーダーは SUNRISE RAINBOW(TECAN)を使用

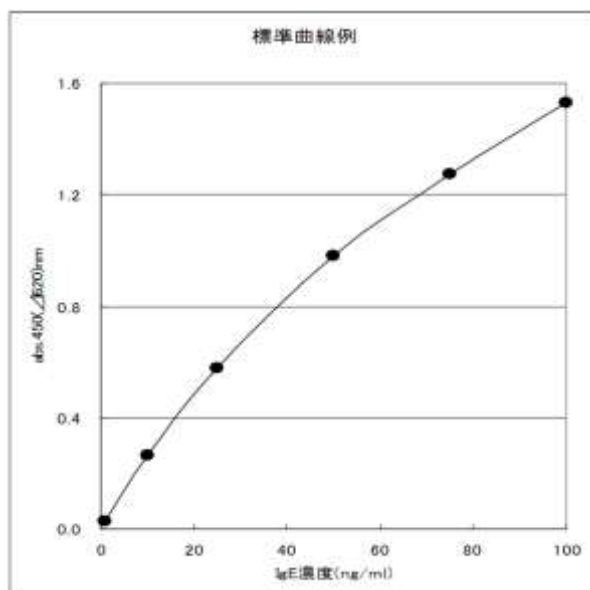

## 13. キットの性能

### ● 測定範囲

マウス IgE を 1~100 ng/ml の範囲で測定できます。

## ●特異性

この ELISA 系で使用されている抗体はマウス IgE に対して特異的です。  
関連物質を本キットで測定しました結果は下表の通りです。

検体名	交差性	対象物質濃度
マウス IgE	100%	100 ng/ml
マウス IgG	<0.01%	1 mg/ml
マウス IgA	<0.01%	1 mg/ml
マウス IgM	<0.01%	1 mg/ml
ラット IgE	<0.1%	100 ng/ml
ヒト IgE	<0.1%	100 ng/ml
BSA	<0.01%	10 mg/ml

## ●精度試験(アッセイ内変動)(5 重測定、3 検体)

平均 C.V.値は 5%未満

## ●再現性試験(アッセイ間変動)(5 重測定、3 検体、4 日間)

平均 C.V.値は 5%未満

## ●添加回収試験

2 血清検体に異なる 2 濃度の IgE を添加し測定した結果、回収率は 99.7%から 103%でした。

## ●希釈直線性

血清検体を連続的に希釈用緩衝液で 3 段階希釈し測定した結果、直線回帰の  $R^2$  は 0.9997 でした。

## 14.参考値

マウス IgE 測定値 : 平均 85 ng/ml、SD 18 ng/ml

亜種 : NC/Nga、雌、5 週齢、24 匹、血清

飼育条件、採血条件、検体保管条件により測定値は変動しますので、この測定値は目安としてお使い下さい。

## 15.トラブルシューティングと Q&A

### ●すべてのウェルでの反応が弱い

可能な解釈

- 1) 標準品や検体の入れ忘れ。
- 2) 発色に関連する試薬溶液の入れ忘れ。
- 3) 発色に関連する試薬溶液の取り違いや希釈調製不良。
- 4) 酵素阻害剤の混入。
- 5) キット保管温度の影響(凍結した場合)。
- 6) プレートの過剰な洗浄。
- 7) 発色液の温度が低かった。

### ●最小標準溶液濃度(1.0 ng/ml)の OD 値よりブランク OD 値が高くなる。

可能な解釈

洗浄が不適当、不完全であった。

(ペルオキシダーゼ・アビジン結合物と反応後の洗浄回数 3 回を同じ流速で 4~6 回に増やして下さい。)

### ●変動係数(CV)が大きい

可能な解釈

- 1) 洗浄が不適当、不完全であった。
- 2) 標準品や管理血清、または検体の攪拌が不十分であった(凍結検体の攪拌は充分に行って下さい)。
- 3) ピペティング操作が一定ではなかった。

### ●Q-1 : キットは分割して使用することができますか？

A-1 : できます。プレートに貼られた透明シールをストリップの間にそってカッターなどで切り離してご使用下さい。使用しないプレートはシールを貼った状態で冷蔵庫に保管して下さい。

### ●Q-2 : プレートを取り出したらウェルの中に液体が入っていましたが何ですか？

A-2 : 出荷時に保存安定液が充填してあります。

### ●更に詳しいトラブルシューティングや Q&A は弊社ホームページをご覧ください。

## 16.参考文献

この製品を使用した参考文献は弊社 Web サイト「[論文リスト](#)」をご参照下さい。


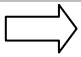
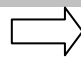
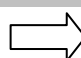
## 【測定手順概要とチェックリスト】

**必ず取扱説明書を一読して検体条件、測定条件、測定方法を確認後測定操作を行って下さい。**

操作法は弊社 Web サイト[\[良い結果を出すためのポイント\(動画\)\]](#) 並びに「Q&A」をご参照下さい。

- ☐ ウェルプレート、試薬類を十分に室温 (20~25℃) に戻して下さい。**室温化には 2 時間位必要**
- ☐ 濃縮洗浄液の希釈 : 室温化された精製水で、**10 倍**に希釈して下さい。
- ☐ 標準溶液の希釈(例) : 室温化された緩衝液で、希釈して下さい。

希釈例	濃度 (ng/ml)	100	75	50	25	10	1.0	0
	標準溶液 (μl)	原液	原液:150	原液:100	原液:50	原液:20	原液:5	0
	緩衝液 (μl)		50	100	150	180	495	200

		各操作注意事項並びに関連情報
<input type="checkbox"/>	抗体固相化 96 ウェルプレート	
<input type="checkbox"/>	↓ 洗浄 3 回 (*②)	洗浄液除去後、直ちに次の試薬分注
<input type="checkbox"/>	希釈検体 (例えば緩衝液 45 μl+検体 5 μl) または標準溶液 50 μl	<a href="#">「ピペッティング」</a> の動画参照
<input type="checkbox"/>	↓ 攪拌 (*③)、室温 (20~25℃)、2 時間反応、静置 (*④) 	第一反応 <a href="#">「反応条件」</a> の動画参照
<input type="checkbox"/>	ビオチン結合抗 IgE 抗体の希釈 室温化された緩衝液で、 <b>1,000 倍</b> に希釈して下さい。	希釈溶液の調製は第一反応中に行う 2 段階希釈をお勧めします
<input type="checkbox"/>	↓ 洗浄 3 回 (*②)	洗浄液除去後、直ちに次の試薬分注
<input type="checkbox"/>	ビオチン結合抗 IgE 抗体 50 μl	<a href="#">「ピペッティング」</a> の動画参照
<input type="checkbox"/>	↓ 攪拌 (*③)、室温 (20~25℃)、2 時間反応、静置 (*④) 	第二反応 <a href="#">「反応条件」</a> の動画参照
<input type="checkbox"/>	ペルオキシダーゼ・アビジン結合物の希釈 室温化された緩衝液で、 <b>2,000 倍</b> に希釈して下さい。	希釈溶液の調製は第二反応中に行う 2 段階希釈をお勧めします
<input type="checkbox"/>	↓ 洗浄 3 回 (*②)	洗浄液除去後、直ちに次の試薬分注
<input type="checkbox"/>	ペルオキシダーゼ・アビジン結合物 50 μl	<a href="#">「ピペッティング」</a> の動画参照
<input type="checkbox"/>	↓ 攪拌 (*③)、室温 (20~25℃)、1 時間反応、静置 (*④) 	第三反応 <a href="#">「反応条件」</a> の動画参照
<input type="checkbox"/>	↓ 洗浄 3 回 (*②)	洗浄液除去後、直ちに次の試薬分注
<input type="checkbox"/>	発色液 (TMB) <b>TMB が室温化されていることを確認</b> 50 μl	分注後、濃度により青色に変色
<input type="checkbox"/>	↓ 攪拌 (*③)、室温 (20~25℃)、20 分間反応、静置 (*④) 	
<input type="checkbox"/>	反応停止液 (1M H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) <b>強酸性につき取扱注意</b> 50 μl	分注後、濃度により黄褐色に変色
<input type="checkbox"/>	↓ 攪拌 (*③)	直ちに攪拌
<input type="checkbox"/>	吸光度測定 (主波長 450nm、副波長 620nm:600~650nm)	副波長はプレート裏面の汚れ等を キャンセルします

- (\*②) **洗浄液をウェルに分注後、手のひらの上で 10 秒ほど軽く振り廃棄します。**3 回連続洗浄後、ペーパータオル上にプレートを逆さにして叩き洗浄液を完全に除去します。洗浄液除去後の乾燥に注意して次の溶液を直ちに分注します。洗浄液をピペットで添加する際の液量目安は 300 μl/ウェルです。万一、最小標準溶液濃度 (1.0 ng/ml) の OD 値よりブランク OD 値が高くなる場合は解決方法の 1 つとして、ペルオキシダーゼ・アビジン結合物と反応後の洗浄回数 3 回を同じ流速で 4~6 回に増やして下さい。プレート洗浄機ご使用の場合の圧力目安は 5~25ml/分 (ノズルの径により異なります) です。第一反応後の初回の洗浄のみウェル間のコンタミに注意して下さい。[「洗浄操作」](#)

の動画をご参照下さい。

( \* ③ ) 攪拌の目安は 600～1,200rpm・10 秒間、3 回。「[攪拌操作](#)」の動画をご参照下さい。

( \* ④ ) 攪拌終了後プレートシールを貼って静置して下さい。「[反応条件](#)」の動画をご参照下さい。

プレートシールは保護紙を剥がして、粘着面をプレート側にして貼り付けて下さい。一度使用したプレートシールは再使用しないで下さい。

## ワークシート

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												
H												

【測定名】 \_\_\_\_\_

【所属】 \_\_\_\_\_

【測定者】 \_\_\_\_\_ 【測定日】 \_\_\_\_\_

【キットロット番号】 \_\_\_\_\_ 【有効期限】 \_\_\_\_\_

【備考】 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

【製品名】 ; レビス® IgE-ELISA キット (マウス)

【コード番号】 ; AKRIE-010

【英語表記】 ; Mouse IgE ELISA KIT(AKRIE-010, Shibayagi, Gunma, Japan)

【お問い合わせ先】

製造／発売元 ; 株式会社 シバヤギ

〒377-0007 群馬県渋川市石原 1062-1

TEL.0279-25-0279 FAX.0279-23-0313

<E-mail>[syc-info@shibayagi.co.jp](mailto:syc-info@shibayagi.co.jp)

<URL><http://www.shibayagi.co.jp>